

ahn myLab HC-01

Hämatokrit-Zentrifuge 12000 min⁻¹

Mikroprozessorsteuerung – Hightech-Mikroprozessor sorgt für absolute Präzision und Genauigkeit des Betriebs für eine zuverlässige Zentrifugation von Blutproben

Intuitives Bedienfeld – Ein gut gestaltetes Bedienfeld mit einer großen Digitalanzeige und klar beschrifteten Soft-Touch-Tasten ermöglicht die vollständige Steuerung aller Kernfunktionen der Hämatokritzentrifuge

Bürstenloser Gleichstrommotor – Langlebiger, wartungsfreier bürstenloser Gleichstrommotor mit variable Schleuderdrehzahlen und starker Fliehkraftherzeugung

Rotor mit großer Kapazität – Zentrifugenrotor mit 24 Plätzen nimmt 45 mm und 75 mm Kapillarröhrchen für die Verarbeitung großer Probenmengen auf


Unwuchterkennung – Die automatische Last-Unwuchterkennung warnt den Bediener und verhindert, dass der Schleuderzyklus mit einer unausgeglichene Last beginnt

Deckelverriegelung – Die sicherheitsfokussierte Deckelverriegelung schützt den Benutzer vor

Verletzungen, indem sie den Zugang zum Rotor verriegelt, während er sich noch dreht

Platzsparend – Kompakte Hämatokritzentrifuge, die ohne Leistungseinbußen nur wenig Platz auf der Arbeitsplatte einnimmt

Leichtgewicht – Leichte und robuste Konstruktionsmaterialien ermöglichen die Tragbarkeit der Hämatokritzentrifuge ohne ergonomische Risiken.

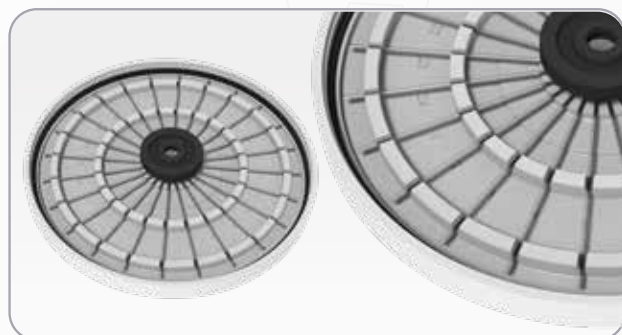

24-fach Kapillar-Rotor

Bestellinformation

Beschreibung	Kat. Nr.
AHN myLab® HC-01 Hämatokritzentrifuge 12.000 U/min	7-020-00-0

Spezifikationen	
Motortyp	Bürstenloser Gleichstrommotor
Rotorkapazität	24 Kapillarröhrchen (45mm/75mm)
Relative Zentrifugalkraft	14118 x g (Max.)
Geschwindigkeitseinstellungen	500 – 12000 U/min (Max.)
Anpassung der Geschwindigkeit	±100 U/min
Timer-Einstellung	bis zu 12 Minuten
Gewicht des Geräts	4.3 kg (inkl. Rotor)
Abmessungen (L x B x H)	330 x 265 x 161 mm

Lieferumfang
1 Stk. Hämatokritzentrifuge 12000 U/min
1 Stk. Stromversorgungsadapter
1 Stk. 24-Slot-Kapillarroter (vorinstalliert)
1 Stk. Blut-Lesegrät
1 Stk. T-Innensechskantschlüssel
1 Stk. Bedienungsanleitung
1 Stk. Garantiekarte

