

AHN myDpette

Flaschenaufsatz-Dispenser

Einziger Kolbenmechanismus - Reinigung von Kolben und Zylinder ohne Beeinträchtigung der Kalibrierung

Doppelskala - Lesbarkeit des Volumens von beiden Seiten

Federloses Ventil-Design - für eine reibungslose Funktionsweise und hohe Chemikalienbeständigkeit

Umweltfreundlich - während der Entleerung der Röhren im Rezirkulationsmodus wird das Reagenz zurück in die Reagenzflasche umgeleitet, um jegliche Verschwendung wertvoller Reagenzien zu verhindern, für eine sichere und sparsame Handhabung

Komfortable Bedienung - 360° drehbarer Dispenser, Flaschenetikett ist hierdurch immer sichtbar / anpassbares Teleskop-Ansaugrohr auf verschiedene Flaschenhöhen / ergonomische Handhabung

Einfache Kalibrierung - entspricht dem Standard DIN EN ISO 8655-5



2
JAHRE
GARANTIE


autoklavierbar
120 °C
20 min

Bestellinformationen

Beschreibung	VE	Kat.-Nr.
AHN myDpette Flaschenaufsatz-Dispenser 0,25-2,5 mL	Karton/1 Stk.	8-700-00-0
AHN myDpette Flaschenaufsatz-Dispenser 0,5-5,0 mL	Karton/1 Stk.	8-701-00-0
AHN myDpette Flaschenaufsatz-Dispenser 1,0-10,0 mL	Karton/1 Stk.	8-702-00-0
AHN myDpette Flaschenaufsatz-Dispenser 2,5-25,0 mL	Karton/1 Stk.	8-703-00-0
AHN myDpette Flaschenaufsatz-Dispenser 5,0-50,0 mL	Karton/1 Stk.	8-704-00-0

Lieferumfang

- 1 Stk. Flaschenaufsatz-Dispenser
- 4 Stk. Flaschen-Adapter (Gewindegrößen: 28, 38, 40 und 45 mm)
- 1 Stk. Teleskop-Ansaugrohr
- 1 Stk. Rückdosierrohr
- 1 Stk. Kalibrationswerkzeug
- 1 Stk. Bedienungsanleitung
- 1 Stk. Konformitätserklärung
- 1 Stk. Kalibrierbericht
- 1 Stk. Garantiekarte

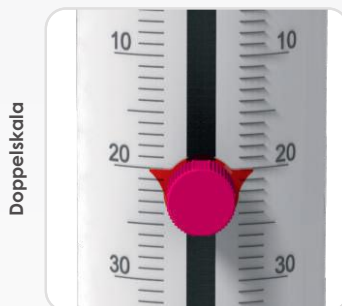

Doppelskala



Rückführventil



+49(0)3631/46594-04
+49(0)3631/46594-10
info@ahn-bio.de

Uthleber Weg 14
D-99734 Nordhausen
www.ahn-bio.de

ahn®
biotechnologie GmbH