

# ahn myLab SM-01

Magnetrührer 1500 min<sup>-1</sup>

**Anwendung** - in Laboren, Apotheken und Schulen


**Maximale Geschwindigkeit** - einstellbar von 15 bis 1500 min<sup>-1</sup> im Intervall von 50 min<sup>-1</sup> / softwaregesteuerte sukzessive Beschleunigung

**Einstellung der Dauer** - von 1- 99 Minuten / Dauerbetrieb

**Optimale Vermischung** - Puls-Modus, bei dem sich die Mischrichtung alle 30 Sekunden ändert

**Wartungsfreies Design** - spritzwasser-, korrosions- sowie chemikalienbeständig / enthält keine beweglichen Teile / hochwertiger Rührmagnet

**Benutzerfreundliche Oberfläche und Design** - digitales Display mit Echtzeit-Geschwindigkeits- und Restlaufzeitanzeige / Speicherung der letzten Einstellung / extrem flach (nur 16,0 mm) / ebene Oberfläche ermöglicht eine einfache Reinigung

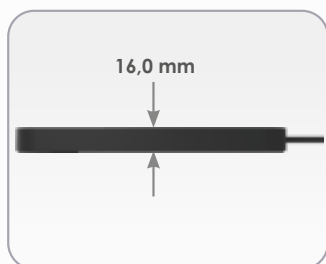

## Bestellinformation

Beschreibung	Kat.-Nr.	Spezifikationen
AHN myLab® SM-01 Magnetrührer 1500 min <sup>-1</sup>	7-300-00-0	Max. Rührmenge 800 mL
		Empfohlene Rührmagnetlänge 25 mm
		Schutzklasse IP65
		Abmessungen (BxTxH) 156x110x13,2 mm
		Gewicht 400 g
Optionales Zubehör	Kat.-Nr.	
Magnetrührstäbchen - PTFE beschichtet, 25x8 mm	CRS-MAG	
Lieferumfang		
1 Stk. Magnetrührer 1500 min <sup>-1</sup>		
1 Stk. Magnetrührstäbchen (PTFE beschichtet, 25x8 mm)		
1 Stk. Bedienungsanleitung		
1 Stk. Garantiekarte		

ahn®



+49(0)3631/65242-0



+49(0)3631/65242-90



Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Deutschland



info@cappahn.com



www.ahn-bio.de

