

# ahn myLab MC-01

Mikrozentrifuge 6000 min<sup>-1</sup>

**Anwendung** - Trennung von Partikeln aus Suspension oder Makromolekülen aus Lösungen

**Kapazität** - geschlossener Winkelrotor für 8 x 1,5 mL / 8 x 2,0 mL Mikrozentrifugenröhrchen

**Maximale Geschwindigkeit** - 6000 min<sup>-1</sup> / 2000 x g

**Unterschiedliche Gefäßoptionen** - Adapter für 0,2 mL / 0,5 mL Gefäße verfügbar

**Einzigartiges geschlossenes Rotor-Design** - sorgt für einen verbesserten Luftstrom durch geringe Reibung, schützt temperaturempfindliche Proben durch geringe Wärmeentwicklung und ermöglicht einen ultraleisen und vibrationsfreien Betrieb


**Sicheres Arbeiten** - bei Ungleichgewicht sorgt die elektronische Bremse für den sofortigen Stopp des Geräts

**Langlebigkeit** - robuste Konstruktion / solides Scharnier- und Verschlussdesign

**Schnelle und komfortable Bedienung** - Möglichkeit des Schnelldurchlaufs durch einfaches Schließen und Öffnen des Deckels / digitales Display

**Geringer Platzbedarf** - geeignet für den Einsatz in Abzugshauben sowie Kühlräumen

**Drehzahlgenauigkeit** +/- 100 min<sup>-1</sup>

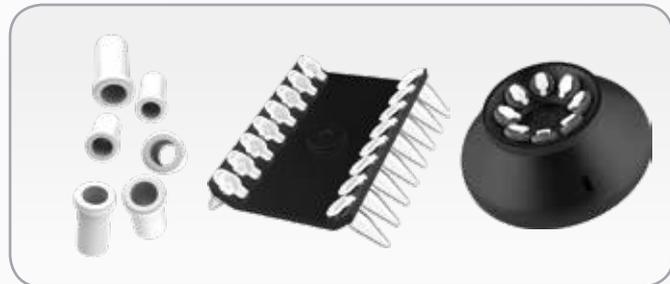

## Bestellinformationen

Beschreibung	Kat.-Nr.
AHN myLab® MC-01 Mikrozentrifuge 6000 min <sup>-1</sup>	7-000-01-0

Spezifikationen	
Geräuschpegel	< 55 db
Schnelldurchlauf	ja, Deckelaktivierung an/aus
Energieverbrauch	10 W
Abmessungen (BxTxH)	162 x 157 x 115 mm

### Lieferumfang

1 Stk. Mikrozentrifuge 6000 min <sup>-1</sup>
1 Stk. 1,5 / 2,0 mL Winkelrotor geschlossen
1 Stk. Rotor für PCR-Streifen
1 Stk. Inbusschlüssel
8 Stk. Adapter für 0,2 mL Gefäße
8 Stk. Adapter für 0,5 mL Gefäße
1 Stk. Externer Netzadapter
1 Stk. Bedienungsanleitung
1 Stk. Garantiekarte
1 Stk. Konformitätserklärung

