

ahn myLab SM-01

Magnetrührer 1500 min⁻¹

Anwendung - in Laboren, Apotheken und Schulen


Maximale Geschwindigkeit - einstellbar von 15 bis 1500 min⁻¹ im Intervall von 50 min⁻¹ / softwaregesteuerte sukzessive Beschleunigung

Einstellung der Dauer - von 1- 99 Minuten / Dauerbetrieb

Optimale Vermischung - Puls-Modus, bei dem sich die Mischrichtung alle 30 Sekunden ändert

Wartungsfreies Design - spritzwasser-, korrosions- sowie chemikalienbeständig / enthält keine beweglichen Teile / hochwertiger Rührmagnet

Benutzerfreundliche Oberfläche und Design - digitales Display mit Echtzeit-Geschwindigkeits- und Restlaufzeitanzeige / Speicherung der letzten Einstellung / extrem flach (nur 16.0 mm) / ebene Oberfläche ermöglicht eine einfache Reinigung

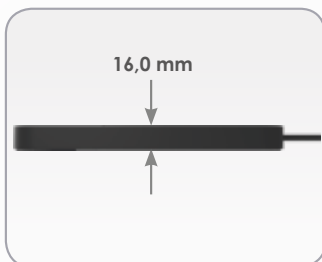

Spezifikationen

Bestellinformationen

Beschreibung		Kat.-Nr.	Spezifikationen	
AHN myLab® SM-01 Magnetrührer 1500 min ⁻¹		7-300-00-0	Max. Rührmenge	800 mL
			Empfohlene Rührmagnetlänge	25 mm
			Schutzklasse	IP65
			Abmessungen (BxTxH)	20x164x16 mm
			Gewicht	400 g
Optionales Zubehör		Kat.-Nr.		
Magnetührstäbchen - PTFE beschichtet, 25x8 mm		CRS-MAG		
Lieferumfang				
1 Stk. Magnetrührer 1500 min ⁻¹				
1 Stk. Magnetührstäbchen (PTFE beschichtet, 25x8 mm)				
1 Stk. Bedienungsanleitung				
1 Stk. Garantiekarte				

