

# ahn myLab TR-03

## Platten-Rotator 30 min<sup>-1</sup>

**Anwendung** - ideal für die Verarbeitung von Blutproben, das Trennen und Mischen von Flüssigkeiten sowie von Pulverproben

**Kapazität** - 12 x 15 mL- und 4 x 50 mL-Röhrchen oder 22 x 15 mL-Röhrchen / maximales Fassungsvermögen von 1,0 kg

**Konstante Drehzahl** - 30 min<sup>-1</sup> mit einer Genauigkeit von  $\pm 2$  min<sup>-1</sup>

**Optimales Mischen** - kreisförmige Bewegung erlaubt sanftes, aber effektives Mischen

**Robuste und platzsparende Bauweise** - robuste Metallbauweise mit Gummifüßen für stabiles Arbeiten / kompaktes Design benötigt minimalen Platz

**Einfache Wartung und Anpassung** - die Rotationsplatte kann zur Reinigung und zum Austausch leicht entfernt werden




## Bestellinformationen

Beschreibung	Kat.-Nr.
AHN myLab® TR-03 Platten-Rotator 30 min <sup>-1</sup>	7-220-00-0
Platte 22 x 15 mL (im Lieferumfang des TR-03 enthalten)	7-220-02-0

Optionales Zubehör	Kat.-Nr.
Platte 12 x 15 mL + 4 x 50 mL	7-220-01-0

Spezifikationen	
Laufzeit	Kontinuierlich/endlos
Geräuschpegel	Geräuschloser Betrieb
Max. Fassungsvermögen	1,0 kg
Schutzklasse	IP 21
Abmessungen (BxTxH)	346 x 185 x 145 mm
Gewicht	2,5 kg

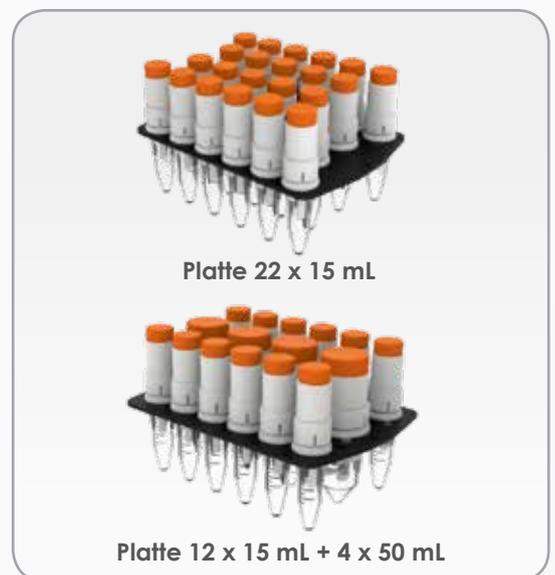

Lieferumfang
1 Stk. Platten-Rotator 30 min <sup>-1</sup>
1 Stk. Netzteiladapter
1 Stk. Bedienungsanleitung
1 Stk. Garantiekarte
1 Stk. Platte 22 x 15 mL

