

ahn myPlate®

PCR- und qPCR-Platten



96 x 0,1 mL | 96 x 0,2 mL

Optimales Format – ohne Rand, mit Rand, Halbbrand und Halbbrand erhöht: die ahn myPlate® PCR-Platten sind in verschiedenen Optionen erhältlich, um den spezifischen experimentellen Anforderungen gerecht zu werden und bieten Vielseitigkeit und Kompatibilität mit verschiedenen PCR-Thermocyclern und Arbeitsabläufen.

Versionen – erhältlich als Niedrigprofil-PCR-Platte mit 0,1mL Well-Kapazität

Alphanumerische Kodierung: ahn myPlate® PCR-Platten sind mit einer alphanumerischen Kodierung versehen, die eine einfache Identifizierung der Lage der einzelnen Vertiefungen ermöglicht, so dass die Proben während der Experimente bequem verfolgt werden können


Erhöhter Well-Rand – Der erhöhte Well-Rand der ahn myPlate® PCR Platten sorgt für eine sichere Versiegelung mit Folie, verhindert Verdunstung und erhält die Integrität der Proben

Mattierte Optione – Die mattierte Oberfläche trägt dazu bei, das Signal-Rausch-Verhältnis bei der qPCR deutlich zu erhöhen und verbessert so die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Versuchsergebnisse

Weißer Optionen – Die weiße Farbe verbessert den Kontrast und die Sichtbarkeit der Signale und ermöglicht eine bessere Erkennung und Analyse der qPCR-Reaktionen

Verschließbar – mit Einwegkleber zum sicheren Verschließen der PCR-Platte

Kompatibilitätstabelle auf Anfrage erhältlich

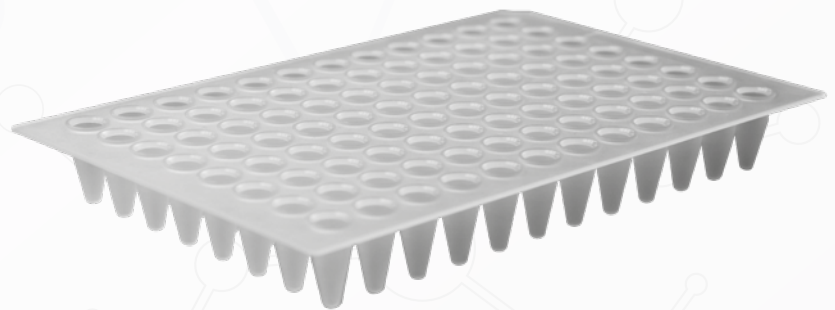

metall
- frei

autoklavierbar
121°C
15 min

Bestellinformation

Volume	Höhe	Farbe	Verpackung	VE	Kat. Nr.
96 x 0.1 mL (qPCR) ohne Rand	15.5mm	mattiert	Beutel	5x20	3-049-00-0
96 x 0.1 mL (qPCR) Halbbrand	15.5mm	mattiert	Beutel	5x10	3-049-01-0
96 x 0.1 mL (qPCR) Halbbrand, erhöht	15.5mm 16.7mm mit Rand	mattiert	Beutel	5x10	3-049-02-0
96 x 0.1 mL (qPCR) Halbbrand	15.5mm	weiß	Beutel	5x10	3-049-01-9
96 x 0.1 mL (qPCR) mit Rand	15.5mm	mattiert	Beutel	5x10	3-049-03-0
96 x 0.2 mL (PCR) ohne Rand	20.58mm	mattiert	Beutel	5x10	3-051-00-0
96 x 0.2 mL (qPCR) Halbbrand	20.58mm	mattiert	Beutel	5x10	3-051-01-0
96 x 0.2 mL (qPCR) Halbbrand, erhöht	20.58mm 22.93mm mit Rand	mattiert	Beutel	5x10	3-051-02-0
384 x 40µL (qPCR) mit Rand	9.7 mm	mattiert	Beutel	5x10	3-053-00-0
384 x 40µL (qPCR) mit Rand	9.7mm	weiß	Beutel	5x10	3-053-00-9

ahn®



+49(0)3631/65242-0

+49(0)3631/65242-90

Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Deutschland



info@cappahn.com



www.ahn-bio.de

